

# BloodTrack® HaemoBank™

## Fiche de données techniques

Le dispositif HaemoBank avec 20 compartiments à accès sécurisé dotés des indicateurs visuels est disponible sous forme de kiosque à installation murale ou de kiosque indépendant avec imprimante. Il est également possible de le commander séparément pour fonctionner avec votre kiosque BloodTrack et votre imprimante. Il est également possible de commander un kit d'installation murale/au sol si nécessaire.

### Spécifications



#### Utilisation et données électriques

Utilisation	Stockage de produits sanguins et d'autres produits médicaux et scientifiques
Plage de températures	2 °C à 10 °C pour une température ambiante de 15 °C à 32 °C ambiante
Point de consigne par défaut	4 °C
Tension d'entrée et fréquence	115 V (60 Hz) ; 230 V (50 Hz) ; 230 V (60 Hz)
Tolérance à la tension	±10 %
Disjoncteurs	Unité principale = 7 A (quantité 2)
Source d'alimentation	Prise mise à la terre, conforme aux exigences électriques locales dans tous les pays
Niveau de pression acoustique (dBA)	<70 dBA
Utilisation intérieure/extérieure	Utilisation intérieure uniquement

#### Système de réfrigération

Système de réfrigération	Circulation d'air forcée
Capacité nominale du compresseur	150 watts (ASHRAE LBP)
Réfrigérant	R-134A (non CFC)
Charge initiale	213 g




#### Contrôleur

Interface	i.C <sup>3</sup> , écran ACL couleur tactile de 178 mm
Type de contrôleur	Microprocesseur avec entrée et affichage par écran tactile. Concentrateur USB pour la récupération de données inclus
Ports de communication	(1) port USB (côté de l'interface utilisateur montée sur la porte) (1) port USB (partie inférieure arrière gauche de l'appareil) (1) port Ethernet (partie inférieure arrière gauche de l'appareil)
Alarmes	Température haute, basse, de l'air, du compresseur ; coupure de courant secteur ; batterie faible ; pas de batterie ; échec de communication
Interface de l'alarme distante	Contacts secs (standard)
Capacité de l'alarme distante	0,5 A à 30 V (RMS) ; 1,0 A à 60 V (CC)
Journal des événements	Toutes les alarmes, ouvertures de la porte, téléchargement via USB
Journal des températures	60 jours, téléchargement via USB Températures min/max réinitialisables
Journal d'accès	60 jours, téléchargement via USB
Batterie de secours	Batterie rechargeable au plomb-acide scellée de 12 V, 7 Ah (quantité 1)

#### Dimensions et construction

Intérieur (l x h x p) (mm)	632 x 464 x 659
Extérieur (l x h x p) (mm) (poignée, charnières, pieds de réglage de niveau inclus)	739 x 874 x 796 Passe par une embrasure de porte standard de 914 mm
Isolation	Haute densité, mousse sans CFC
Épaisseur de la paroi	51 mm
Épaisseur de la porte	32 mm
Matériau interne/externe	Acier galvanisé avec finition par revêtement en poudre résistant aux bactéries
Plateaux (l x L x p) (mm)	20 plateaux ; 121 x 329 x 47
Capacité	1 poche de sang par plateau
Port d'accès arrière externe	1 port standard
Poids net	139 kg
Poids à l'expédition	174 kg
Options/accessoires	Charnière à gauche ou à droite, enregistreur graphique de température, certificat de mappage de température, certificat de calibration Z0199, kit d'installation murale et sur paillasse, roulettes
Conditions requises relatives à l'emplacement	Installation sur paillasse : Profondeur minimum de 763 mm ; doit pouvoir supporter une charge d'au moins 193 kg en toute sécurité ; le kit d'installation murale et sur paillasse doit être utilisé Installation sous paillasse : (l x h) 756 mm x 876 mm <b>REMARQUE</b> : Ajouter 51 mm à la profondeur nécessaire si la prise murale se situe juste derrière l'appareil.

# Spécifications

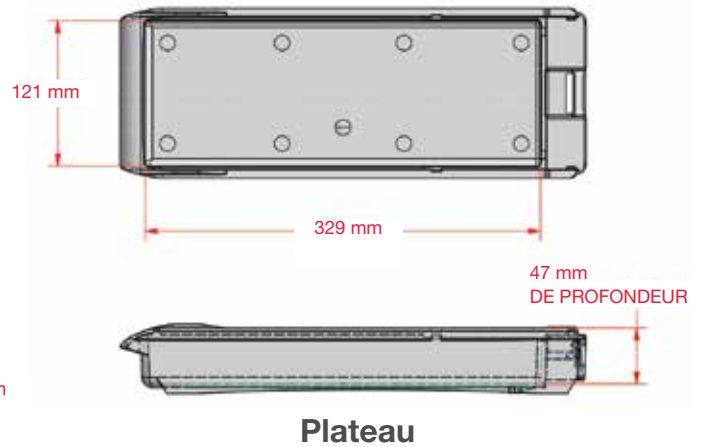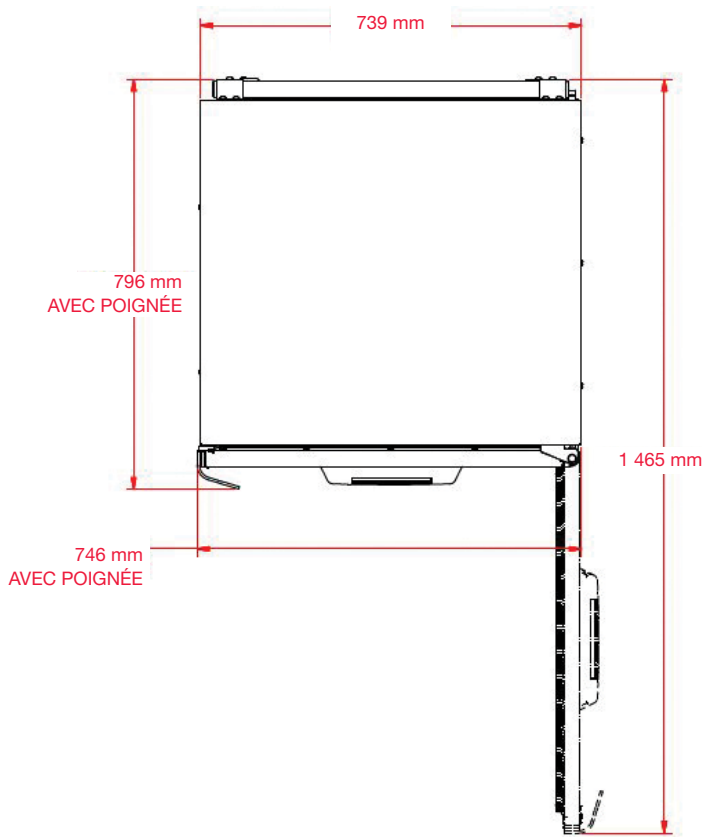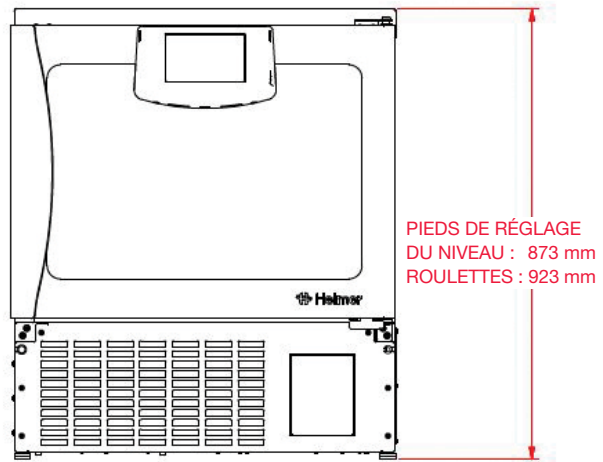

Le dispositif HaemoBank est un dispositif médical conçu et fabriqué conformément à la directive 93/42/CEE (classe IIa).

Pour obtenir la liste des bureaux dans le monde entier et leurs coordonnées, consultez [www.haemonetics.com/officelocations](http://www.haemonetics.com/officelocations).

© 2015 Haemonetics Corporation. Haemonetics, Haemonetics The Blood Management Company, BloodTrack et HaemoBank sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Haemonetics Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Helmer est une marque commerciale d'Helmer, Inc. 10.2015 États-Unis. COL-COPY-000949-FR(AA)

**CE 0123** Haemonetics S.A.  
Signy Centre, Rue des Fléchères 6  
**EC REP** 1274 Signy-Centre  
Switzerland