

Protocolo universal de plaquetas UPP®

Un nuevo nivel de rendimiento
y flexibilidad

El desarrollo definitivo del software para el dispositivo MCS®+

DISPOSITIVOS INTEGRADOS



El Protocolo universal de plaquetas (UPP®) es una única tarjeta de protocolo que ofrece ventajas de rendimiento y la flexibilidad de recolectar plaquetas estándar y concentradas en combinación con hematíes y plasma.



Nuevas características

- Control automático de la instalación de equipos desechables
- Nueva gestión del volumen extracorporal (VEC)
- Nueva gestión del plasma
- Nuevo cálculo del recuento posterior de plaquetas del donante (estimado)
- Nueva pauta de anticoagulación que optimiza las recuperaciones de plaquetas

UPP® es la evolución definitiva para el dispositivo MCS®+

- Mayor flexibilidad: plaquetas en plasma o solución aditiva
- Mejor rendimiento: procedimientos rutinarios más rápidos para las plaquetas
- Mejor experiencia para el donante
- Sin necesidad de realizar cambios en el hardware de la máquina

Mejor rendimiento


Procedimientos rutinarios más rápidos para las plaquetas

- Optimiza la velocidad de procesamiento de la sangre con la eliminación de los tiempos muertos en el procedimiento
- Reduce el tiempo del donante desde el 10% cuando se recolectan plaquetas en plasma, hasta más del 15% para las recolecciones de C-SDP

Mejora la productividad

- Concentra plaquetas en más de 15 veces el recuento previo de plaquetas del donante (C-SDP) para reducir aún más los volúmenes residuales de plasma para las plaquetas en solución aditiva¹
- Recolecta mayores rendimientos en un tiempo comparable para el procedimiento


Mejora comparativa de la productividad para plaquetas del C-SDP¹

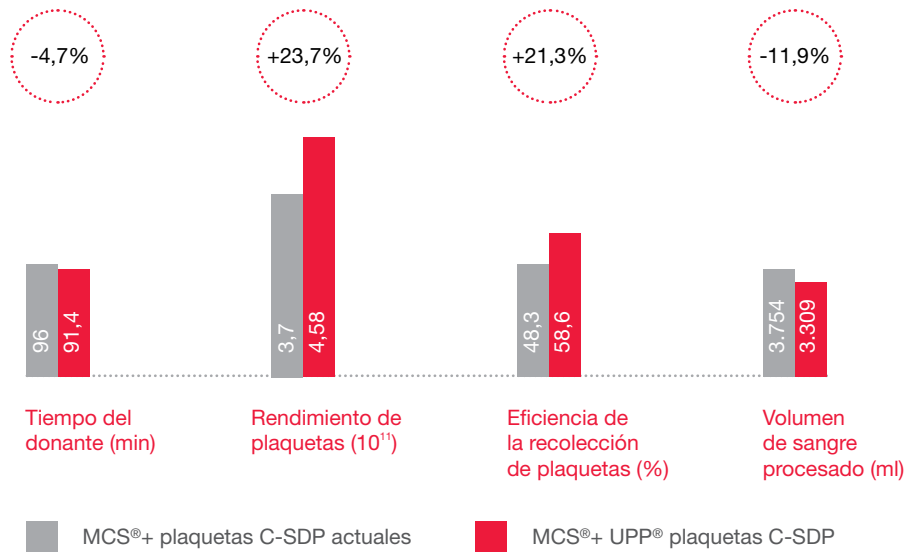

Mayor flexibilidad

- Recolecta plaquetas en plasma o concentrados de plaquetas suspendidas en solución aditiva de plaquetas
- Cumple los requisitos de los métodos de inactivación de patógenos actualmente disponibles
- Ofrece la recolección opcional y simultánea de plasma y/o hematíes con todas las opciones de plaquetas disponibles


UPP[®] combina todas las posibles opciones de plaquetas en una sola aplicación

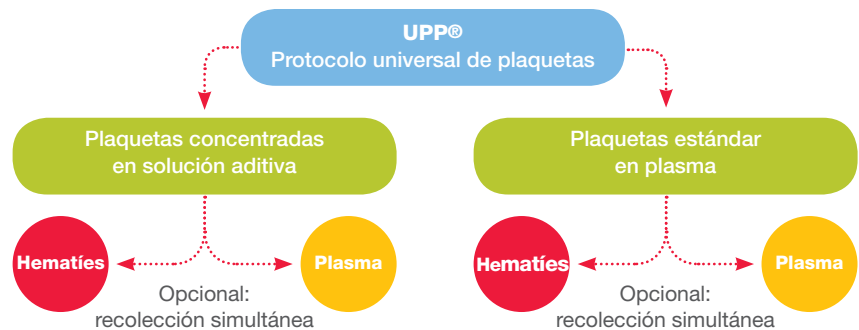

Mayor confort del donante

Mejora el confort del donante con su nueva gestión del volumen extracorporal, utilizando el retorno previsto del plasma y un mayor control del retorno de citrato

Modo de extracción modificado con retorno previsto del plasma

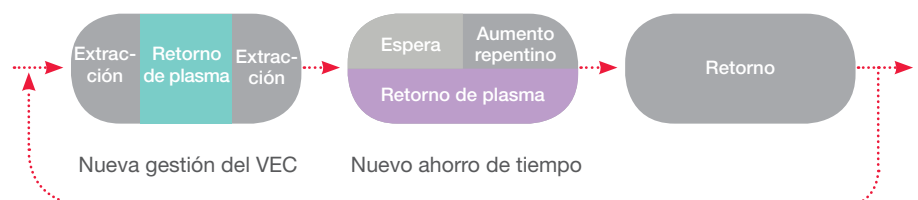

¹ Informes de las pruebas clínicas TR-CIB04006 y TR-CLN-100258

Especificaciones

El protocolo UPP® funciona en todos los dispositivos internacionales Haemonetics® MCS®+ LN 9000 existentes (solo para venta y distribución fuera de los EE. UU.). UPP® está a la venta como una gama separada de protocolos que contiene las instrucciones para el usuario y el software del protocolo.

No es necesario realizar ningún cambio en el hardware de la máquina

Información para pedidos

UPP®, Protocolo universal de plaquetas LN 112320-XX

Si desea información acerca de las versiones en otros idiomas, póngase en contacto con su representante de ventas local

Equipos desechables

Los equipos desechables se venden por separado

Referencia del producto	Descripción del producto
999F-E	Equipo PLT Conc. y PLS c/filtro
949FF-E	Equipo PLT y hematíes c/filtro PLT y hematíes
997CF-E	Equipo PLT y PLS c/filtro
999FF-P-SL	Equipo PLT y plasma c/filtros*
949FF-P-SL	Equipo PLT y hematíes c/filtro PLT y hematíes*

*a la venta solo en Francia

Alemania
0800.180.8890

Austria
0800.29.2777

Bélgica y Luxemburgo
FR: 0800.754.80
NL: 0800.754.82

Dinamarca
8088.7112

Francia
0800.90.11.58

Italia
800.870.200

Noruega
800.18.453

Países Bajos
0800.0222.707

Reino Unido
0808.234.4817

República Checa
800.143.243

Suecia
020.797.150

Suiza
0800.898.898

CE 0123 HAEMONETICS U.K. LTD
5 Ashley Drive, Bothwell
Scotland G71 8DS
Great Britain
EC REP

© 2013 Haemonetics Corporation. Haemonetics, MCS and UPP are trademarks or registered trademarks of Haemonetics Corporation in the USA, other countries, or both. 02.2013, USA. COL-PP-000142-ES(AB)

La información contenida en este documento solamente puede distribuirse fuera de los EE. UU.

Haemonetics S.A. ■ Signy Centre ■ Rue des Fléchères ■ P.O. Box 262 ■ 1274 Signy-Centre ■ Switzerland ■ www.haemonetics.com