

UPP®

Protocollo piastrine universale

La nuova frontiera delle prestazioni
e della flessibilità

Una decisiva evoluzione del software per il dispositivo MCS®+

DISPOSITIVI INTEGRATI



Il protocollo piastrine universale (UPP®) è una smart card per protocollo unica che introduce miglioramenti delle prestazioni e la flessibilità per eseguire la raccolta di piastrine standard e concentrate in concomitanza alla raccolta di globuli rossi e plasma.



Nuove funzionalità

- Comando per l'installazione del set monouso automatizzato
- Nuova funzione di gestione del volume extracorporeo (ECV)
- Nuova funzione di gestione del plasma
- Nuovo calcolo della postconta piastrinica del donatore (stima)
- Nuovo regime di anticoagulazione, che ottimizza il recupero delle piastrine

UPP® è un'evoluzione decisiva per il dispositivo MCS®+

- Maggiore flessibilità: piastrine nel plasma o in soluzione additivo
- Migliori prestazioni: procedure per piastrine di routine più rapide
- Migliore esperienza del donatore
- Non sono necessarie modifiche ai componenti hardware della macchina

Migliori prestazioni


Procedure per piastrine di routine più rapide

- Ottimizza la velocità di trattamento del sangue, eliminando i tempi morti della procedura
- Riduce il tempo di donazione del 10% durante la raccolta di piastrine nel plasma e fino a oltre il 15% per le raccolte C-SDP

Miglioramento della produttività

- Aumenta la concentrazione delle piastrine di oltre 15 volte rispetto alla preconta del donatore (C-SDP) per ridurre ulteriormente i volumi di plasma residuo per le piastrine in soluzione additivo¹
- A pari durata della procedura, consente raccolte più elevate


Miglioramento comparativo della produttività per le piastrine C-SDP¹

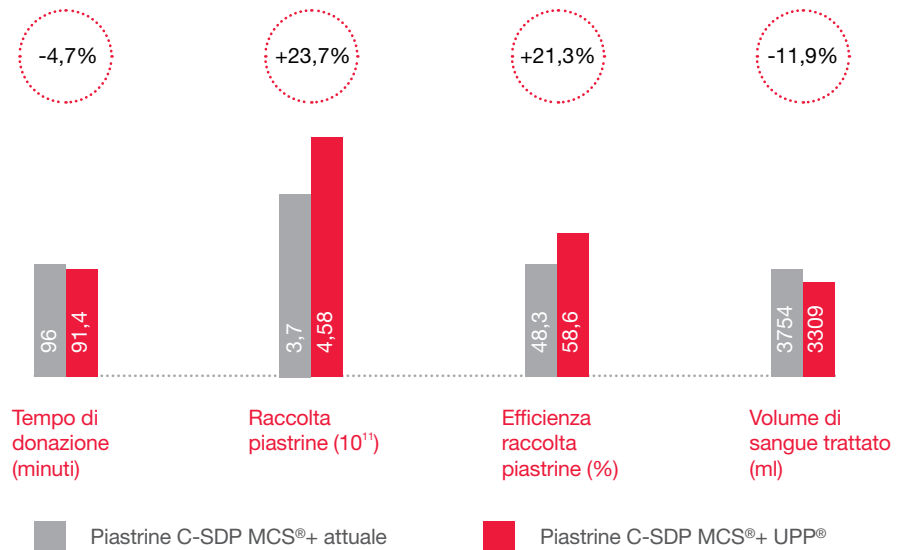

Maggiore flessibilità

- Raccoglie le piastrine nel plasma, oppure le piastrine concentrate sospese nella soluzione additivo per piastrine
- Conforme ai requisiti per i metodi di inattivazione dei patogeni attualmente vigenti
- Offre la raccolta concomitante opzionale di plasma e/o di globuli rossi con tutte le opzioni disponibili per le piastrine


UPP[®] unisce tutte le opzioni disponibili per le piastrine in una singola applicazione

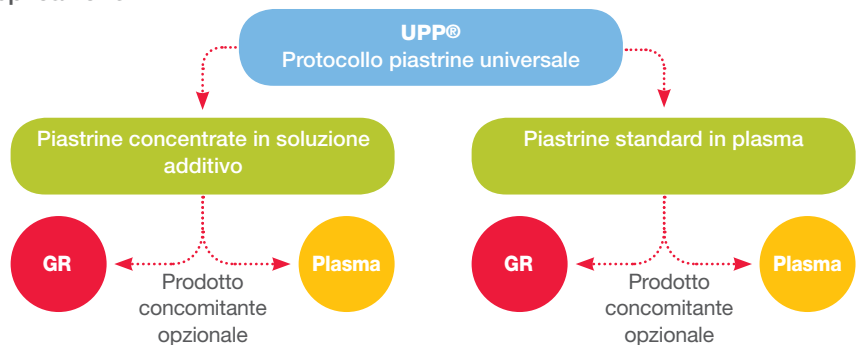

Migliore esperienza del donatore

Maggior confort del donatore grazie alla gestione del volume extracorporeo, che prevede il ricorso alla reinfusione anticipata del plasma e un migliore controllo della reinfusione del citrato

Modalità di prelievo modificata con reinfusione anticipata del plasma

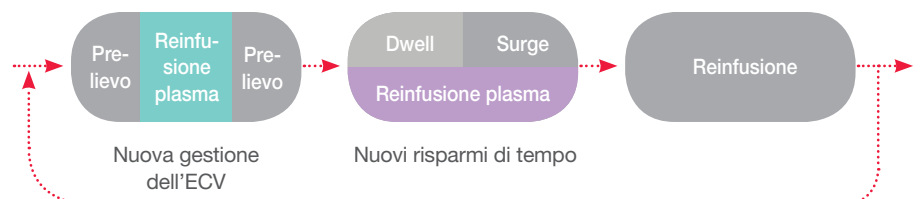

¹ Report dei test clinici TR-CIB04006 e TR-CLN-100258

Specifiche

UPP® funziona su tutti i dispositivi Haemonetics® MCS®+ LN 9000 internazionali esistenti (esclusivamente per la vendita e la distribuzione al di fuori degli Stati Uniti). UPP® è disponibile come smart card per protocollo distinta, contenente le istruzioni per l'utente e il software del protocollo.

Non sono necessarie modifiche ai componenti hardware della macchina

Informazioni per l'ordinazione

UPP®, protocollo piastrine universale LN 112320-XX

Per informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rappresentante alle vendite autorizzato

Set monouso

I set monouso sono acquistabili separatamente

Codice articolo	Descrizione del prodotto
999F-E	Set piastrine e plasma concentrati con filtro
949FF-E	Set piastrine e GR con filtro per piastrine e GR
997CF-E	Set piastrine e plasma con filtro
999FF-P-SL	Set piastrine e plasma con filtri*
949FF-P-SL	Set piastrine e GR con filtro per piastrine e GR*

*disponibile solo in Francia

Austria
0800.29.2777

Belgio e Lussemburgo
FR: 0800.754.80
NL: 0800.754.82

Danimarca
8088.7112

Francia
0800.90.11.58

Germania
0800.180.8890

Italia
800.870.200

Norvegia
800.18.453

Paesi Bassi
0800.0222.707

Regno Unito
0808.234.4817

Repubblica Ceca
800.143.243

Svezia
020.797.150

Svizzera
0800.898.898

CE 0123 HAEMONETICS U.K. LTD
5 Ashley Drive, Bothwell
Scotland G71 8DS
Great Britain
EC REP

© 2013 Haemonetics Corporation. Haemonetics, MCS and UPP are trademarks or registered trademarks of Haemonetics Corporation in the USA, other countries, or both. 02.2013, USA. COL-PP-000142-IT(AB)

Le informazioni qui contenute sono esclusivamente per la distribuzione fuori dagli Stati Uniti

Haemonetics S.A. ■ Signy Centre ■ Rue des Fléchères ■ P.O. Box 262 ■ 1274 Signy-Centre ■ Switzerland ■ www.haemonetics.com