


PCS[®]2

La soluzione ideale per le raccolte di plasma

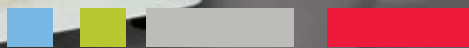

HAEMONETICS[®]
THE Blood Management Company

Facile da usare

- Pompe automontanti
- Priming automatico
- Messaggi di errore facilmente interpretabili
- Sensori ottici avanzati
- Display di facile lettura
- Allarmi ridotti
- Tempo medio di procedura: 37 min (per 600 mL)



Caratteristiche di sicurezza

- Sensori di aria
- Sensore di pressione linea donatore
- Basso rapporto sangue/anticoagulante
- Sensore per liquidi in centrifuga
- Centrifuga interna


Protocolli diversificati

- Plasma Povero di Piastrine (PPP)
 - Plasma Fresco Congelato (FFP)
- Entrambi i protocolli prevedono la reinfusione opzionale con soluzione fisiologica

Compatto

- Piccolo
- Facile da spostare
- Leggero
- Ideale per i centri con spazi ridotti e per le raccolte esterne

Set monouso con linea per la reinfusione di soluzione fisiologica

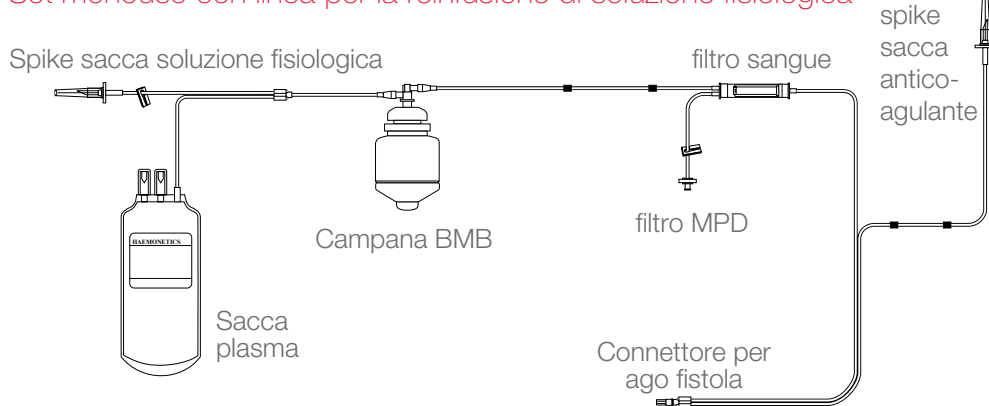

Specifiche tecniche

PCS2 (chiuso)	altezza	44 cm
	larghezza	55 cm
	profondità	33 cm
PCS2 con carrello (aperto)	altezza	140 cm
	larghezza	57 cm
	profondità	67 cm
	altezza asta	67 cm dal piano carrello
Peso del PCS2		25 kg
Peso del carrello		13,2 kg
Voltaggio elettrico		230 VAC +/- 10%
Frequenza operativa		47-63 Hz
Corrente		F2,5 A @ 250 V
Lunghezza cavo alimentazione		4,88 m

Informazioni per gli ordini

Descrizione	Codice	pezzi/confezione
Linea di prelievo	620	100
Campana BMB	625B	25
Sacca di raccolta plasma	690	102
Sacca di raccolta plasma con adattatore per provette sotto vuoto	SC690	80
Sacca di raccolta plasma con linea per soluzione fisiologica	692	72

Per ulteriori informazioni riguardanti altri set monouso disponibili, contattare il rappresentante locale Haemonetics.